

May 2024, GRC/CYP Ver 1.0

Οδηγίες χρήσης του παρελκομένου μεταφοράς της αντλίας VYAFUSER™

Το VYAFUSER™ είναι ένα εμπορικό σήμα της AbbVie AB.



UK
CA

CE



Phillips-Medsize A/S
Gimsinglundvej 20
DK-7600 Struer
Denmark



0AV122

Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με την Αντλία VYAFUSER™.



Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Phillips-Medsize <https://www.phillipsmedsize.com/ifu>



devices.abbvie.com

devices.abbvie.com

Οι Οδηγίες Χρήσης του παρελκόμενου μεταφοράς αναφέρονται στις Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή της ΑΝΤΛΙΑΣ VYAFUSER™.

Οι Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή προορίζονται για χρήση από τους Ασθενείς με προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον, τους Φροντιστές τους και τους Επαγγελματίες Υγείας. Οι Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή περιέχουν οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της αντλίας και των εξαρτημάτων για τη χορήγηση του φαρμάκου. Οι Οδηγίες Χρήσης των συγκεκριμένων μεμονωμένων εξαρτημάτων (δηλ. Οδηγίες Χρήσης προετοιμασίας του διαλύματος, Οδηγίες Χρήσης παρελκόμενου μεταφοράς, Οδηγίες Χρήσης προσαρμογέα φιαλιδίου, Οδηγίες Χρήσης του προσαρμογέα κεντρικής τροφοδοσίας, Οδηγίες Χρήσης του φορτιστή μπαταρίας, και Οδηγίες Χρήσης του σετ έγχυσης) αναφέρονται στις Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή.

Οι Οδηγίες Χρήσης για τους Επαγγελματίες Υγείας προορίζονται για τον προγραμματισμό της αντλίας. Οι Οδηγίες Χρήσης για τους Επαγγελματίες Υγείας περιέχουν οδηγίες για τον προγραμματισμό της αντλίας για ένα συγκεκριμένο ασθενή και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Συλλογικά, οι Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή και οι Οδηγίες Χρήσης για τους Επαγγελματίες Υγείας αποτελούν τις πλήρεις Οδηγίες Χρήσης του συστήματος χορήγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Μέρη Παρελκομένου Μεταφοράς	1
1.1 Προβλεπόμενη Χρήση	1
1.2 Προβλεπόμενος Χρήστης	1
1.3 Ενδεδειγμένη Χρήση	1
1.4 Αντένδειξη	1
1.5 Εισαγωγή	2
2. Τρόπος Μεταφοράς της Αντλίας	3
2.1 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Γοφό σας	5
2.2 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Σώμα σας	8
2.3 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Λαιμό σας	10
3. Αφαίρεση του Παρελκομένου Μεταφοράς	13
4. Καθαρισμός του Παρελκομένου Μεταφοράς	15
5. Επεξήγηση των Συμβόλων	17

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ.

1. Μέρη Παρελκομένου Μεταφοράς

1.1 Προβλεπόμενη Χρήση

Το Σύστημα Χορήγησης Φαρμάκου για τη νόσο του Πάρκινσον της AbbVie είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα χορήγησης φαρμάκου που προορίζεται για την έγχυση του φαρμακευτικού προϊόντος φοσκαρβιντόπα και φοσλεβοντόπα της AbbVie για τη θεραπεία της προχωρημένης νόσου του Πάρκινσον.

Η Αντλία VYAFUSER™ είναι μια περιπατητική αντλία έγχυσης που προορίζεται για την υποδόρια χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος φοσκαρβιντόπα και φοσλεβοντόπα της AbbVie. Η αντλία VYAFUSER™ και το παρελκόμενο μεταφοράς είναι μέρη του Συστήματος Χορήγησης Φαρμάκου για τη νόσο του Πάρκινσον της AbbVie. Το παρελκόμενο μεταφοράς εξυπηρετεί την περιπατητική χρήση της αντλίας.

1.2 Προβλεπόμενος Χρήστης

Η Αντλία VYAFUSER™ και το Παρελκόμενο Μεταφοράς προορίζονται για χρήση από ενήλικες ασθενείς με προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας.

1.3 Ενδεδειγμένη Χρήση

Το Παρελκόμενο Μεταφοράς ενδείκνυται για χρήση από ασθενείς με προχωρημένη νόσο του Πάρκινσον οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία με την αντλία VYAFUSER™.

1.4 Αντένδειξη

Καμία.

1.5 Εισαγωγή

Το Παρελκόμενο Μεταφοράς είναι αρμόδιο για τη μεταφορά της Αντλίας VYAFUSER™ στο σώμα του ασθενούς. Δύο ζώνες και ένας ιμάντας επιτρέπουν την εργασία με διαφορετικούς τρόπους, ό,τι προτιμάτε καλύτερα.

Το Παρελκόμενο Μεταφοράς δεν έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί την Αντλία στεγνή. Δεν προστατεύει την αντλία από σταγονίδια νερού στον τους ή από τη βροχή ή από άλλες διαρροές υγρών.

Περιλαμβάνονται δύο ζώνες. Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που εφαρμόζει καλύτερα και να τις συνδέσετε μεταξύ τους για επιπλέον μήκος.

Οι ζώνες σας επιτρέπουν να φοράτε το Παρελκόμενο Μεταφοράς γύρω από τους γοφούς σας και να προσανατολίζετε την Αντλία οριζόντια ή κατακόρυφα.

Ο ιμάντας σας επιτρέπει να το φοράτε στο λαιμό σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα και τη ζώνη για πιο σφιχτή εφαρμογή.

Το Παρελκόμενο Μεταφοράς περιλαμβάνει (βλ. **Εικόνα Α**):

- Θήκη μεταφοράς (αποκαλούμενη "Θήκη" σε αυτές τις οδηγίες)
- Αφαιρούμενο Πτερύγιο
 - Χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κουμπιών της Αντλίας.
 - Μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς.
- 2 Ζώνες (φαρδύτερες από τον ιμάντα και με πόρπη)
 - Χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της Θήκης στο γοφό.
 - Μπορούν να συνδεθούν 2 ζώνες για να δημιουργηθεί μία μακρύτερη ζώνη.
 - Οι ζώνες φέρουν την ένδειξη "S" για κοντές και "L" για μακριές.
- Ιμάντας (λεπτότερος ιμάντας με κουμπωτά άγκιστρα και μαξιλαράκι λαιμού)
 - Χρησιμοποιείται για την ασφάλιση της Θήκης στο λαιμό ή κατά μήκος του σώματος.
 - Συσκευάζεται μέσα στη Θήκη κατά την αποστολή.



Εικόνα Α

2. Τρόπος Μεταφοράς της Αντλίας

Φορέστε το Παρελκόμενο Μεταφοράς με τρόπο που να σας προσφέρει άνεση και να σας παρέχει εύκολη πρόσβαση για αλληλεπίδραση με την Αντλία.

Προσοχή: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο στραγγαλισμού, **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το Παρελκόμενο Μεταφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε ο ιμάντας ή οι ζώνες να μπορούν να τυλίγονται γύρω από το λαιμό σας.


Σημείωση: Όταν η Σύριγγα βρίσκεται στην αντλία και η σωλήνωση του σετ έγχυσης είναι συνδεδεμένη στο σώμα, κανένα τμήμα της Σύριγγας δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από 20 εκ (7 3/4 ίντσες) από το σημείο έγχυσης ή κάτω από 55 εκ (21 1/2 ίντσες) από το σημείο έγχυσης. Η τοποθέτησή του σε σημείο υψηλότερο ή χαμηλότερο από τα υποδεικνυόμενα μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της χορήγησης.

Σημείωση: **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το Παρελκόμενο Μεταφοράς εάν έχει υποστεί ζημιά.

Σημείωση: **ΜΗΝ** αφήνετε την Αντλία να πέσει κατά την τοποθέτηση του Παρελκομένου Μεταφοράς.

Σημείωση: Ανακυκλώστε/απορρίψτε το Παρελκόμενο Μεταφοράς σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Σημείωση: Τυχόν σοβαρά περιστατικά σχετιζόμενα με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή της συσκευής και στις αρμόδιες Αρχές.

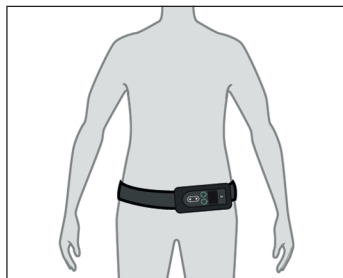

Εικόνα Β

Για να **Μεταφέρετε την Αντλία στο Γοφό σας** (βλ. Εικόνα Β), μεταβείτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Γοφό σας**.



Εικόνα Γ

Για να **Μεταφέρετε την Αντλία στο Σώμα σας** (βλ. *Εικόνα Γ*), μεταβείτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Σώμα σας**.



Εικόνα Δ

Για να **Μεταφέρετε την Αντλία στο Λαιμό σας** (βλ. *Εικόνα Δ*), μεταβείτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Λαιμό σας**.



Εικόνα Ε

Προαιρετικά: Για να **Μεταφέρετε την Αντλία στο Σώμα σας** (βλ. *Εικόνα Ε*), μεταβείτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Σώμα σας**.


2.1 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Γοφό σας

1. Ελέγξτε και τις δύο ζώνες και επιλέξτε τη μία ή και τις δύο, ανάλογα με το μέγεθος ζώνης που προτιμάτε.

Σημείωση: Οι 2 ζώνες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις δύο ή μπορείτε να τις συνδέσετε μεταξύ τους για να προσθέσετε μήκος.

Σημείωση: Όταν μεταφέρετε τη Θήκη στο γοφό σας, συνιστάται να δένετε τη ζώνη γύρω από τη μέση σας ενώ κάθεστε και πριν τοποθετήσετε την Αντλία. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή ακούσιας πτώσης της Αντλίας.

Σημείωση: **ΜΗΝ** αφήνετε την Αντλία να πέσει κατά την τοποθέτηση του Παρελκομένου Μεταφοράς.

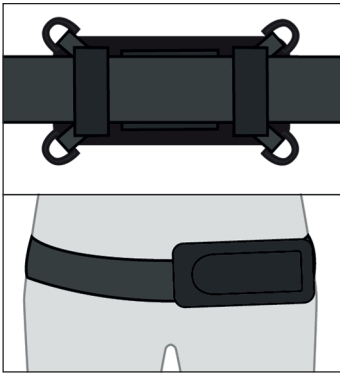


Εικόνα ΣΤ

2. Περάστε τη Ζώνη μέσα από τους βρόγχους στο πίσω μέρος της Θήκης.


Σημείωση: Όταν η Σύριγγα βρίσκεται στην αντλία και η σωλήνωση του σετ έγχυσης είναι συνδεδεμένη στο σώμα, κανένα τμήμα της Σύριγγας δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από 20 εκ (7 3/4 ίντσες) από το σημείο έγχυσης ή κάτω από 55 εκ (21 1/2 ίντσες) από το σημείο έγχυσης. Η τοποθέτησή του σε σημείο υψηλότερο ή χαμηλότερο από τα υποδεικνυόμενα μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της χορήγησης.

- Οριζόντιος προσανατολισμός: Για να φορέσετε την Αντλία σε οριζόντιο προσανατολισμό, περάστε τη Ζώνη μέσα από τους βρόγχους στο πίσω μέρος της θήκης, όπως φαίνεται στην *Εικόνα ΣΤ*
- Κατακόρυφος προσανατολισμός: Για να φορέσετε την Αντλία σε κατακόρυφο προσανατολισμό, περάστε τη Ζώνη μέσα από τους βρόγχους στο πίσω μέρος της θήκης, όπως φαίνεται στην *Εικόνα Ζ*

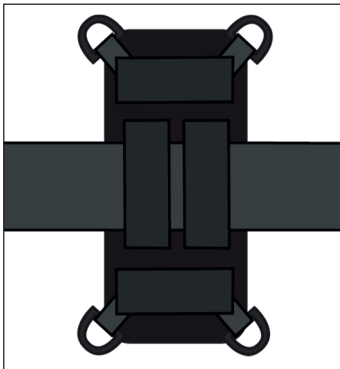


Εικόνα Ζ


Σημείωση: Όταν φοράτε την Αντλία κατακόρυφα στο γοφό σας, εάν η Οθόνη είναι πιο κοντά στο έδαφος, όταν την γέρνετε προς τα επάνω για να την διαβάσετε, η Οθόνη θα είναι σωστά προσανατολισμένη για ανάγνωση.

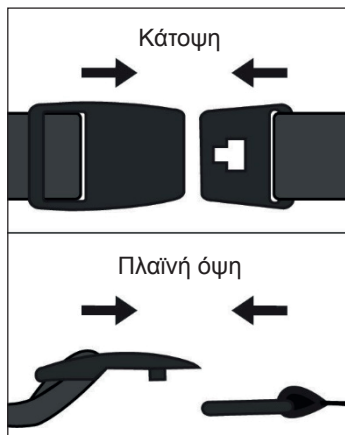

Εικόνα Η

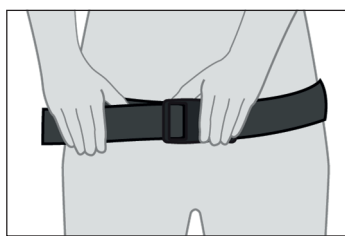

Εικόνα Θ

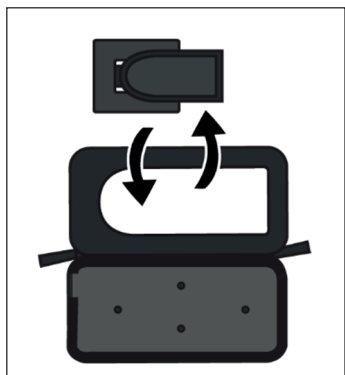

Εικόνα Ι

3. Φορέστε τη Ζώνη

α. Στερεώστε τη Ζώνη με την πόρπη (βλ. *Εικόνα Η*).

β. Χαλαρώστε ή σφίξτε τη Ζώνη έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά γύρω από τους γοφούς.

γ. Ενώ κρατάτε την πόρπη στο ένα χέρι και τη ζώνη στο άλλο χέρι, σύρετε τη ζώνη έως το επιθυμητό μήκος (βλ. *Εικόνα Θ*).

4. Αφαιρέστε ή εισαγάγετε το (προαιρετικό) αφαιρούμενο πτερύγιο (βλ. *Εικόνα Ι*).

Σημείωση: Το πτερύγιο μπορεί να αποσυνδεθεί μερικώς, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα κουμπιά της Αντλίας ή να αφαιρεθεί μόνιμα. Ενώ έχει αποσυνδεθεί μερικώς, παραμένει προσδεδμένο στη θήκη μεταφοράς.

α. Ξεκουμπώστε τη Θήκη.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένα ή και τα δύο φερμουάρ για να ανοίξετε τη Θήκη.

β. Προσαρτήστε ή αποσυνδέστε το αφαιρούμενο πτερύγιο.

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε με το πτερύγιο προκειμένου να το τοποθετήσετε με τρόπο που να καλύπτει τα κουμπιά αλλά να μην καλύπτει την οθόνη.




Εικόνα 1Α

5. Εισάγετε την Αντλία.

- α. Εισάγετε την Αντλία στο Παρελκόμενο Μεταφοράς με τα κουμπιά και την οθόνη στραμμένα προς τα έξω και με το άνοιγμα της Σύριγγας ευθυγραμμισμένο με τη Σύριγγα Αντλίας (βλ. Εικόνα 1Α).


6. Κλείστε το φερμουάρ της Θήκης για να ασφαλίσετε την Αντλία.

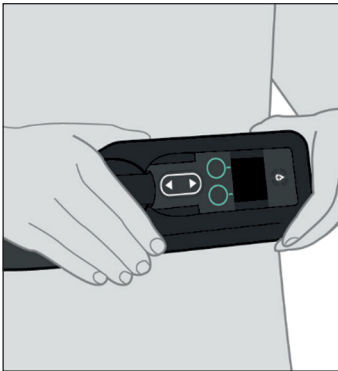

Εικόνα 1Β

7. Γείρτε την Αντλία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε την οθόνη (βλ. Εικόνα 1Β).

2.2 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Σώμα σας

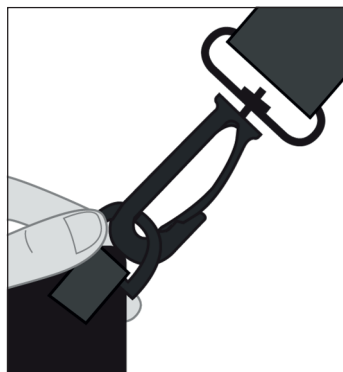


Εικόνα ΙΓ

1. Προσαρτήστε τον Ιμάντα στη Θήκη.

- α. Κουμπώστε το ένα άκρο του Ιμάντα στον ένα δακτύλιο της Θήκης και το άλλο άκρο σε έναν άλλο δακτύλιο, έτσι ώστε η Θήκη να είναι κατάλληλα προσανατολισμένη (βλ. *Εικόνα ΙΓ*).

Σημείωση: Κρατήστε το δακτύλιο ανάμεσα στα δάχτυλά σας με το ένα χέρι για να τον σταθεροποιήσετε κατά την προσάρτηση του κουμπωτού άγκιστρου.

Σημείωση: **MHN** αφήνετε την Αντλία να πέσει κατά την τοποθέτηση του Παρελκομένου Μεταφοράς.

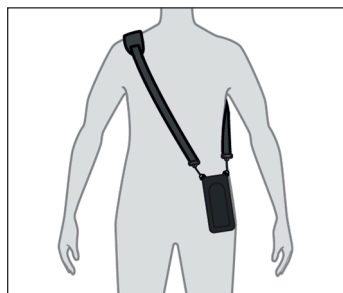


Εικόνα ΙΔ

2. Τοποθετήστε τον Ιμάντα πάνω από το κεφάλι σας έτσι ώστε να ακουμπά στον ένα ώμο (βλ. *Εικόνα ΙΔ*)


- α. Ρυθμίστε τον Ιμάντα χαλαρώνοντας ή σφίγγοντάς τον έτσι ώστε η Αντλία να βρίσκεται κοντά στο σώμα σας.

Σημείωση: Όταν η Σύριγγα βρίσκεται στην αντλία και η σωλήνωση του σετ έγχυσης είναι συνδεδεμένη στο σώμα, κανένα τμήμα της Σύριγγας δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από 20 εκ (7 3/4 ίντσες) από το σημείο έγχυσης ή κάτω από 55 εκ (21 1/2 ίντσες) από το σημείο έγχυσης. Η τοποθέτησή του σε σημείο υψηλότερο ή χαμηλότερο από τα υποδεικνυόμενα μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της χορήγησης.

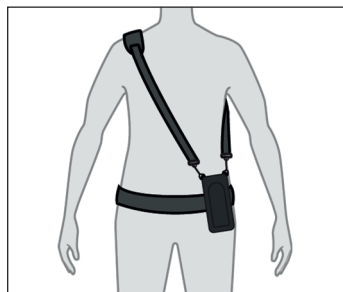

Εικόνα ΙΕ

- β. Προαιρετικά: Προσθέστε τη ζώνη σύροντάς την μέσα από το πίσω μέρος της θήκης, ρυθμίστε το μήκος για σφιχτή εφαρμογή και προσαρτήστε την πόρπη της ζώνης για άνετη εφαρμογή (βλ. *Εικόνα ΙΕ*) (ανατρέξτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Σώμα σας**).

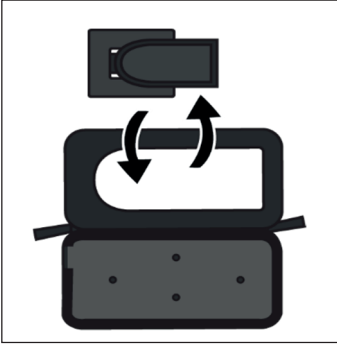

Εικόνα ΙΣΤ

3. Αφαιρέστε ή εισάγετε το (προαιρετικό) αφαιρούμενο πτερύγιο (βλ. Εικόνα ΙΣΤ).

Σημείωση: Το πτερύγιο μπορεί να αποσυνδεθεί μερικώς, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα κουμπιά της Αντλίας ή να αφαιρεθεί μόνιμα. Ενώ έχει αποσυνδεθεί μερικώς, παραμένει προσδεδεμένο στη θήκη μεταφοράς.

α. Ξεκουμπώστε τη Θήκη

Σημείωση: Για την άνεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ένα είτε και τα δύο φερμουάρ.

β. Προσαρτήστε ή αποσυνδέστε το αφαιρούμενο πτερύγιο.

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε με το πτερύγιο προκειμένου να το τοποθετήσετε με τρόπο που να καλύπτει τα κουμπιά αλλά να μην καλύπτει την οθόνη.




Εικόνα ΙΖ

4. Εισάγετε την Αντλία.

α. Εισάγετε την Αντλία στο Παρελκόμενο Μεταφοράς με τα κουμπιά και την οθόνη στραμμένα προς τα έξω και με το άνοιγμα της Σύριγγας ευθυγραμμισμένο με τη Σύριγγα Αντλίας (βλ. Εικόνα ΙΖ).


5. Κλείστε το φερμουάρ της Θήκης για να ασφαλίσετε την Αντλία.

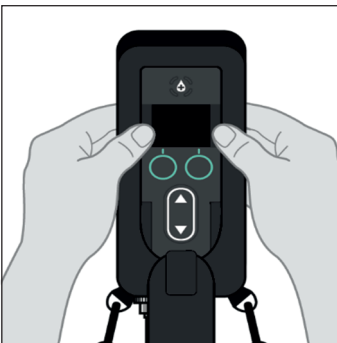

Εικόνα ΙΗ

6. Γείρτε την Αντλία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε την οθόνη (βλ. Εικόνα ΙΗ).

2.3 Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Λαιμό σας

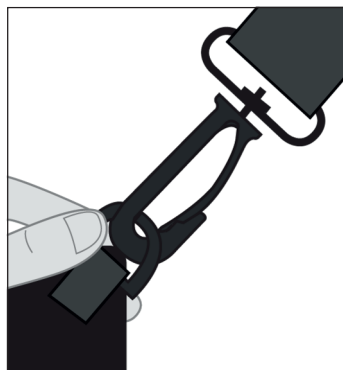


Εικόνα ΙΘ

1. Προσαρτήστε τον Ιμάντα στη Θήκη.

- α. Κουμπώστε το ένα άκρο του Ιμάντα στον ένα δακτύλιο της Θήκης και το άλλο άκρο σε ένα παρακείμενο δακτύλιο, έτσι ώστε η Θήκη να είναι κατάλληλα προσανατολισμένη (βλ. *Εικόνα ΙΘ*).

Σημείωση: Κρατήστε το δακτύλιο ανάμεσα στα δάχτυλά σας με το ένα χέρι για να τον σταθεροποιήσετε κατά την προσάρτηση του κουμπωτού άγκιστρου.

Σημείωση: **ΜΗΝ** αφήνετε την Αντλία να πέσει κατά την τοποθέτηση του Παρελκομένου Μεταφοράς.

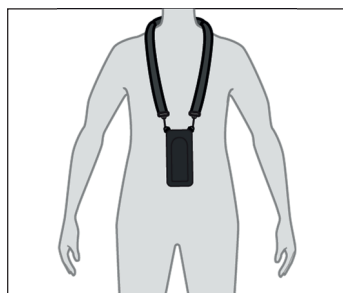


Εικόνα Κ

2. Τοποθετήστε τον Ιμάντα πάνω από το κεφάλι σας (βλ. *Εικόνα Κ*).


- α. Σφίξτε ή χαλαρώστε τον Ιμάντα ώστε η Αντλία να βρίσκεται σε άνετο ύψος και κοντά στο σώμα σας σε άνετη θέση.

Σημείωση: Όταν η Σύριγγα βρίσκεται στην αντλία και η σωλήνωση του σετ έγχυσης είναι συνδεδεμένη στο σώμα, κανένα τμήμα της Σύριγγας δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από 20 εκ (7 3/4 ίντσες) από το σημείο έγχυσης ή κάτω από 55 εκ (21 1/2 ίντσες) από το σημείο έγχυσης. Η τοποθέτησή του σε σημείο υψηλότερο ή χαμηλότερο από τα υποδεικνυόμενα μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της χορήγησης.

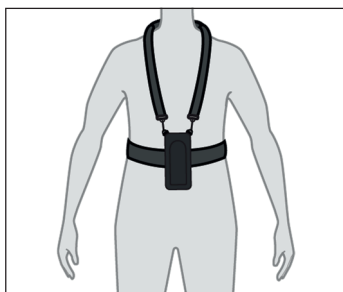

Εικόνα ΚΑ

- β. Προαιρετικά: Προσθέστε τη ζώνη σύροντάς την μέσα από το πίσω μέρος της θήκης, ρυθμίστε το μήκος για σφιχτή εφαρμογή και προσαρτήστε την πόρπη της ζώνης για άνετη εφαρμογή (βλ. *Εικόνα ΚΑ*) (ανατρέξτε στην ενότητα **Προετοιμασία της Θήκης για Μεταφορά στο Λαιμό σας**).

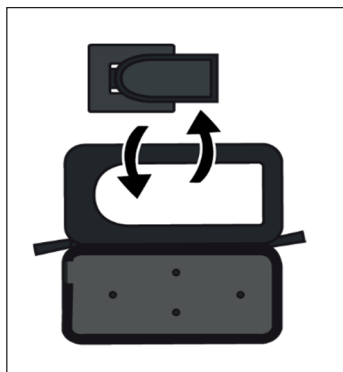

Εικόνα ΚΒ

3. Αφαιρέστε ή εισάγετε το (προαιρετικό) αφαιρούμενο πτερύγιο (βλ. Εικόνα ΚΒ).

Σημείωση: Το πτερύγιο μπορεί να αποσυνδεθεί μερικώς, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα κουμπιά της αντλίας ή να αφαιρεθεί μόνιμα. Ενώ έχει αποσυνδεθεί μερικώς, παραμένει προσδεδεμένο στη θήκη μεταφοράς.

α. Ξεκουμπώστε τη Θήκη

Σημείωση: Για την άνεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ένα είτε και τα δύο φερμουάρ.

β. Προσαρτήστε ή αποσυνδέστε το αφαιρούμενο πτερύγιο.

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε με το πτερύγιο προκειμένου να το τοποθετήσετε με τρόπο που να καλύπτει τα κουμπιά αλλά να μην καλύπτει την οθόνη.




Εικόνα ΚΓ

4. Εισάγετε την Αντλία.

α. Εισάγετε την Αντλία στο Παρελκόμενο Μεταφοράς με τα κουμπιά και την οθόνη στραμμένα προς τα έξω και με το άνοιγμα της Σύριγγας ευθυγραμμισμένο με τη Σύριγγα Αντλίας (βλ. Εικόνα ΚΓ).

5. Κλείστε το φερμουάρ της Θήκης για να ασφαλίσετε την Αντλία.

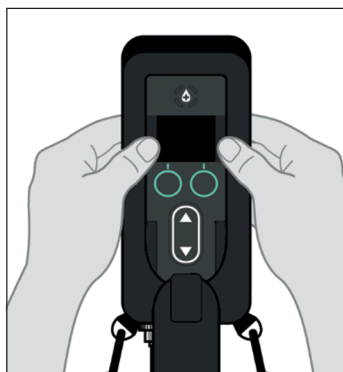

Εικόνα ΚΔ

6. Γείρτε την Αντλία για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε την οθόνη (βλ. Εικόνα ΚΔ).

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ.

3. Αφαίρεση του Παρελκομένου Μεταφοράς

1. Αφαιρέστε την Αντλία από τη Θήκη.

α. Ξεκουμπώστε τη Θήκη για να την ανοίξετε.

Σημείωση: Προσέξτε όταν ξεκουμπώνετε τη Θήκη, ώστε να μην πέσει η Αντλία. Είναι καλή πρακτική να εκτελείτε αυτήν την εργασία όταν βρίσκεστε κοντά σε μια επιφάνεια τραπεζιού.

β. Αφαιρέστε την Αντλία από τη Θήκη.

γ. Τοποθετήστε την Αντλία σε μια επίπεδη επιφάνεια.

2. Αφαιρέστε το Παρελκόμενο Μεταφοράς.

α. Αφαιρέστε το Παρελκόμενο Μεταφοράς από το γοφό, τον ώμο ή το λαιμό σας.

Σημείωση: Κατά την αφαίρεση του Παρελκομένου Μεταφοράς, προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να μην πέσει η Αντλία και να μην τραβηχτούν οι Σωληνώσεις του Σετ Έγχυσης.


ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ.

4. Καθαρισμός του Παρελκόμενου Μεταφοράς

Θα πρέπει να καθαρίζετε το Παρελκόμενο Μεταφοράς όπως απαιτείται.

Είναι αποδεκτό να σκουπίζετε το Παρελκόμενο Μεταφοράς με ένα υγρό πανί ενώ η Αντλία βρίσκεται στο εσωτερικό του, αλλά εάν πρέπει να το καθαρίσετε σχολαστικά, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την Αντλία.

MHN ρίχνετε νερό ή καθαριστικά διαλύματα απευθείας στο Παρελκόμενο Μεταφοράς ή την Αντλία. Προστατέψτε το Παρελκόμενο Μεταφοράς και την Αντλία από τρεχούμενο νερό και διαρροές υγρών.

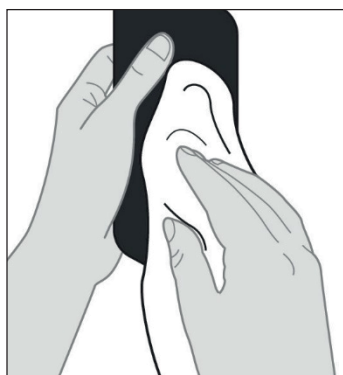

Εικόνα ΚΒ

1. Καθαρίστε το Παρελκόμενο Μεταφοράς.

α. Υγράνετε ελαφρώς ένα μαλακό πανί με καθαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

β. Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια που απαιτεί καθαρισμό (βλ. Εικόνα ΚΒ).

Σημείωση: Αφήστε το Παρελκόμενο Μεταφοράς να στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε την Αντλία.

Σημείωση: **MHN** πλένετε στο πλυντήριο το Παρελκόμενο Μεταφοράς.

Σημείωση: **MHN** στεγνώνετε το Παρελκόμενο Μεταφοράς σε στεγνωτήριο.

Σημείωση: **MHN** καθαρίζετε το Παρελκόμενο Μεταφοράς με ισχυρά χημικά (ακετόνη, διαλύτες, διαβρωτικά απορρυπαντικά κ.λπ.) ή διαβρωτικά υλικά (σκληρές βούρτσες), καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Σημείωση: Εάν αφήσετε το Παρελκόμενο Μεταφοράς εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι πιθανό να ξεθωριάσει.

Σημείωση: Το Παρελκόμενο Μεταφοράς δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 60° C (140° F).

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ.

5. Επεξήγηση των Συμβόλων

Σύμβολο	Τίτλος και Αριθμός Χαρακτηρισμού του Προτύπου	Αριθμός Αναφοράς	Τίτλος/Σημασία του Συμβόλου
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.1.1	Κατασκευαστής
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.1.3	Ημερομηνία κατασκευής
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.1.5	Κωδικός παρτίδας
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.1.6	Αριθμός καταλόγου
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.1.10	Αριθμός μοντέλου
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.3.7	Όρια θερμοκρασίας
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.3.8	Περιορισμός υγρασίας
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.4.12	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή
	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.7.7	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Οδηγία 94/62/ΕΚ της ΕΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και απόφαση 97/129/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής	Το 04 προορίζεται για πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας	Ανακύκλωση

	EN ISO 7010:2020 ISO 7010: 2019	ISO 7010- M002	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/φυλλάδιο οδηγιών
	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745	Παράρτημα V	Το σήμα CE, υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στην (ΕΕ) 2017/745 και άλλες ισχύουσες οδηγίες και κανονισμούς
	Οι Κανονισμοί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 2022 (UK MDR) όπως τροποποιήθηκαν	Μέρος II 10	Η σήμανση UKCA είναι ένα σήμα συμμόρφωσης που υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 2022, όπως τροποποιήθηκαν, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που πωλούνται στη Μεγάλη Βρετανία.
 devices.abbvie.com	EN ISO 15223-1:2021 ISO 15223-1:2021	5.4.3	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσεως
	Νόμος αριθ. 2020-105 Νόμος κατά των αποβλήτων για μια κυκλική οικονομία (AGEC)	Άρθρο 17	Το λογότυπο Triman περιέχει σημαντικές πληροφορίες ταξινόμησης για τους τελικούς χρήστες

Βιβλιογραφικές Αναφορές

EN ISO 15223-1:2021 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ISO 15223-1:2021 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα — Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

EN ISO 7010:2020 Γραφικά σύμβολα — Χρώματα ασφαλείας και σήματα ασφαλείας – Κατοχυρωμένα σήματα ασφαλείας

ISO 7010:2019 ή Γραφικά σύμβολα — Χρώματα ασφαλείας και σήματα ασφαλείας – Κατοχυρωμένα σήματα ασφαλείας

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ.